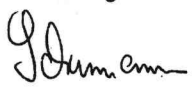



<b>1 Erteilende Zollbehörde</b> Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	<b>2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke</b>  ZT 0270 B - 17836/2010/1 - TB23
<b>3 Antragsteller (Name und Anschrift)</b>  4851285 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes	<b>4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift)</b>  4851285 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes
<b>Wichtige Hinweise</b>  Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind <b>unverbindlich</b> . Es kann aus dieser Auskunft <b>kein</b> Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	<b>5 Datum der Erteilung</b> 2010/04/30
	<b>6 Datum und Nummer des Antrags</b> 2010/03/17
	<b>7 Einreihung in die Zollnomenklatur</b> <b>9021 1010 00 1</b> <b>Umsatzsteuersatz:</b> <b>7%</b>
<b>8 Warenbeschreibung</b> Orthopädische Vorrichtung für Menschen, in Form einer Lumbalorthese, im Wesentlichen bestehend aus einer anatomisch vorgeformten Halbschale, den Rücken bedeckend, aus thermoplastisch verformbarem Polyethylen, mit einer Höhe von 29 cm oder 35 cm. Patientenseitig wird die PE-Schale mit einem Spinnstoffgürtel gepolstert. Ein zweiter Spinnstoffgürtel mit Taschen zur Aufnahme von zwei 2 x 33 cm großen CFK-Stäben (carbonfaserverstärkter Kunststoff) wird außen an der PE-Schale angebracht. Über Aussparungen in der PE-Schale werden die Spinnstoffgürtel miteinander verbunden (Klettverschluss). Die Lumbalorthese wird mittels Klettverschluss am Patienten befestigt. Der äußere Spinnstoffgürtel wird mit Hilfe eines Umlenkmechanismus von vier Zuggurten (in Form von Klettverschlussbändern) am Patienten angebracht. Die Orthese stützt und stabilisiert die Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel und wird hauptsächlich nach lumbaler Bandscheiben- OP, bei degenerativen Instabilitäten, Spondylolyse, Spinalstenosen, Tumoren oder entzündlichen Prozessen im Bereich der Lendenwirbelsäule eingesetzt. Sie findet aber auch nach Wirbelbrüchen der unteren LWS Verwendung.  Äußere Form siehe Abbildung.	
<b>9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben</b>  Sof Tec Lumbo	<b>vertrauliche Daten</b>
<b>11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:</b> Beschreibung <input checked="" type="checkbox"/> Kataloge <input type="checkbox"/> Fotos <input type="checkbox"/> Muster / Proben <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/>	
Ort     Berlin Datum    30. April 2010	Unterschrift    Im Auftrag  (Schumann)
	
Seite 1 von 3	