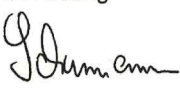


<b>1 Erteilende Zollbehörde</b> Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	<b>2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke</b>  ZT 0270 B - 36333/2013/1 - TB36
<b>3 Antragsteller (Name und Anschrift)</b>  DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes	<b>4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift)</b> DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes
<b>Wichtige Hinweise</b>  Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind <b>unverbindlich</b> . Es kann aus dieser Auskunft <b>kein</b> Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	<b>5 Datum der Erteilung</b> 2013/10/31
	<b>6 Datum und Nummer des Antrags</b> 2013/07/01 -
	<b>7 Einreihung in die Zollnomenklatur</b> <b>9021 1010 00 1</b> <b>Umsatzsteuersatz:</b> <b>7%</b>
<b>8 Warenbeschreibung</b> Rückenorthese, sog. SpinoVA Support Plus Classic Multifunktionsorthese, im Wesentlichen bestehend aus einer den Rücken bedeckenden, anatomisch vorgeformten, patientenseitig gepolsterten, ca. 39 cm hohen und 20 cm breiten Platte aus stabilem Kunststoff sowie einer elastischen Bandage aus durchbrochenem Gewebe mit einer maximalen Höhe von ca. 35 cm, mit sechs entnehmbaren, formstabilen, ca. 1,5 cm breiten Stäben aus Aluminium. Die Platte ist dorsal mittels eines Klettverschlussbandes mit der Bandage verbunden, welche wiederum im Bauchbereich mittels Klettverschluss geschlossen wird. Die Rückenplatte verteilt (überbrückt) die auftretenden Kräfte auf BWS sowie Becken und Kreuzbein. Von außen ist zudem ein Zugsystem aus unelastischen Zuggurten mit Umkehrösen fest angenäht, welches ebenfalls mittels Klettverschluss vor dem Bauch geschlossen wird. Im Bauchbereich kann eine feste, formstabile Bauchpelotte aus Kunststoff, eingenäht in einen veloursartigen Überzug, angeklebt werden. Mithilfe der Bauchpelotte wird durch die Kompression des Bauchraums die Wirbelsäule aufgerichtet und die LWS entlastet. Die abrüstbare Orthese kann dem Therapieverlauf angepasst werden. Äußere Form: siehe Abbildungen in der Anlage. Die Rückenorthese dient hauptsächlich dem Stützen und Halten (Stabilisierung, Entlastung und Entlordosierung) im Bereich der Lenden- und Kreuzbeinwirbel bei Wirbelgleiten, Spondylolyse, Spondylolisthese, Facettensyndrom, Lumbalsyndrom, Lumboischialgie und lumbalen Spinalkanalstenosen, kann aber auch zur Ruhigstellung bei Wirbelbrüchen z. B. bei Frakturen an der Lendenwirbelsäule verwendet werden.  Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereicht.	
<b>9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben</b> <span style="float: right;">vertrauliche Daten</span>	
<b>11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:</b> Beschreibung <input type="checkbox"/> Kataloge <input type="checkbox"/> Fotos <input type="checkbox"/> Muster / Proben <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges <input checked="" type="checkbox"/> Stempel <input type="checkbox"/>	
Ort     Berlin Datum    31. Oktober 2013	Unterschrift    Im Auftrag  (Schumann) 