


1 Erteilende Zollbehörde Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke ZT 0270 B - 16348/2013/1 - TB32			
3 Antragsteller (Name und Anschrift) DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes	4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift) DE4851285 / 0000 Bauerfeind AG Triebeser Str. 16 07937 Zeulenroda-Triebes			
Wichtige Hinweise Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind unverbindlich . Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	5 Datum der Erteilung 2013/09/20			
	6 Datum und Nummer des Antrags 2013/02/25			
	<table border="1"> <tr> <td>7 Einreihung in die Zollnomenklatur</td> <td>9021 1010 00 1</td> </tr> <tr> <td>Umsatzsteuersatz:</td> <td>7%</td> </tr> </table>	7 Einreihung in die Zollnomenklatur	9021 1010 00 1	Umsatzsteuersatz:
7 Einreihung in die Zollnomenklatur	9021 1010 00 1			
Umsatzsteuersatz:	7%			
8 Warenbeschreibung Sog. Spinova Unload Plus, in Form einer Lumbalstützorthese, im Wesentlichen bestehend aus einem ca. 35 cm hohen, mit Klett- und Hakenverschluss vor dem Bauch zu verschließenden Spinnstoffgürtel, mit vier ca. 1,5 cm breiten und ca. 22 cm bzw. 31,5 cm langen, starren, anatomisch vorgeformten, in den Rückenbereich integrierten Aluminiumstäben sowie zwei in den Seitenbereich eingearbeiteten biegsamen Metallfederstäbchen. Die Orthese ist dorsal mit einem anatomisch geformten Überbrückungsrahmen mit 2 starren Aluminiumlängsstreben und 2 selbstanpassenden schwenkbaren Querbügeln, welcher die auftretenden Kräfte auf Brustwirbelsäule sowie Becken und Kreuzbein verteilt und ventral mit einer ca. 25 cm x 17 cm großen Pelotte, die durch die Kompression des Bauchraumes die Wirbelsäule aufrichtet und die Lendenwirbelsäule entlastet ausgestattet. Rückseitig ist entnehmbar ein biegsamer, anatomisch vorgeformter, ca. 32,5 cm x 10 cm großer Überbrückungsrahmen aus Kunststoff mit zwei innenliegenden starren Aluminiumstäben eingearbeitet. Auf der Außenseite verfügt die Vorrichtung über ein elastisches Zuggurtsystem mit einem Bandzugspeicher enthaltenden Gurtschlössern. Zur äußeren Form siehe Abbildung in der Anlage. Die Vorrichtung dient hauptsächlich dem Stützen und Halten der Wirbelsäule (Entlastung durch Entlordosierung) u. a. bei Spondylolyse/ Spondylolisthese, Fassettensyndrom, Lumbalsyndrom, Lumbalischialgie, lumbalen Spinalkanalstenosen und bei Einengung des seitlichen Wurzelkanals, kann aber auch bei Frakturen an der Lendenwirbelsäule eingesetzt werden. Die in einem Karton verpackte Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.				
9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben vertrauliche Daten				
11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt: Beschreibung <input checked="" type="checkbox"/> Kataloge <input type="checkbox"/> Fotos <input type="checkbox"/> Muster / Proben <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> Ort Berlin Unterschrift Im Auftrag Datum 20. September 2013  (Schumann)				

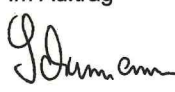