



# ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

PRODUKTARTEN, INDIKATIONEN,  
VERORDNUNG, VERSORGUNG

---

  
eurocom  
• WIR • ENTWICKELN • GESUNDHEIT •



# Vorwort



Oda Hagemeier

Geschäftsführerin  
eurocom e.V. – european  
manufacturers federation  
for compression therapy  
and orthopaedic devices

Fast alle Menschen kommen mit gesunden Füßen zur Welt. Ein ganzes Leben lang sollen sie uns tragen, doch rund 70 Prozent aller Erwachsenen leiden unter Fußbeschwerden. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von zu hoher Belastung, über falsches Schuhwerk bis hin zu Erkrankungen.

Fußbeschwerden können sich schnell zu Fehlstellungen und Fehlhaltungen entwickeln. Sie sind oft schmerzhaft und beeinträchtigen die Lebensqualität der betroffenen Erwachsenen und Kinder. Orthopädische Einlagen können helfen, Symptome zu lindern und ärztlich diagnostizierte Funktionsdefizite auszugleichen.

Mit diesem Ratgeber informieren wir übersichtlich und allgemeinverständlich über die wesentlichen Aspekte rund um das Hilfsmittel Einlagen. Wie unterscheiden sich die verschiedenen Einlagenarten voneinander? Bei welchen Diagnosen sind sie indiziert? Was ist bei der Ausstellung des Rezepts zu beachten? Wie versorgt der Orthopädie-Schuhtechniker bzw. Orthopädietechniker? Antworten auf diese Fragen finden hier alle, die sich mit dem Thema Orthopädische Einlagen beschäftigen. Dabei wenden wir uns an den Fachhandel und das Handwerk ebenso wie an die Hilfsmittelteams der Krankenkassen, Ärzte und Patienten.

Die vorliegende vollständig überarbeitete Neuauflage des Infobuchs Einlagenversorgung spiegelt den Stand der Technik wider und orientiert sich in ihrer Struktur und Terminologie an der aktuellen Fassung der Produktgruppe 08 „Einlagen“ des Hilfsmittelverzeichnisses.

# Inhalt

<b>1</b>	<b>FUNKTION UND PRODUKTARTEN</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>STÜTZENDE EINLAGEN MIT LÄNGS- UND QUERGEWÖLBESTÜTZE</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>BETTUNGSEINLAGEN ZUR ENTLASTUNG</b>	<b>10</b>
3.1	Bettungseinlagen, elastisch, ggf. druckumverteilend	10
3.2	Weichpolsterbettungen, elastisch, druckumverteilend	12
<b>4</b>	<b>STÜTZENDE, KORRIGIERENDE / ENTLASTENDE SCHALENEINLAGEN</b>	<b>14</b>
4.1	Schaleneinlagen, elastisch	15
4.2	Schaleneinlagen, fest, verformbar	16
<b>5</b>	<b>EINLAGEN MIT KORREKTURBACKEN</b>	<b>17</b>
5.1	Drei-Backeneinlagen	17
5.2	Einlagen mit Winkeln	18
5.3	Winkelhebeleinlagen	19
<b>6</b>	<b>EINLAGEN BEI SCHWEREN FUSSFEHLFORMEN</b>	<b>20</b>
6.1	Sensomotorische Einlagen	21
<b>7</b>	<b>INDIKATIONEN</b>	<b>23</b>
7.1	Senkfuß	24
7.2	Plattfuß	25
7.3	Spreizfuß	26
7.4	Hohlfuß	27

---

7.5	Klumpfuß	29
7.6	Fersensporn und Plantarfasciitis	30
7.7	Hallux rigidus	31
7.8	Beinlängendifferenz	33
7.9	Diabetes-Fußsyndrom	34
7.10	Funktionelle Störungen	35
7.11	Motorische / neurologische Gangbildstörungen	36
<b>8</b>	<b>VERORDNUNG UND VERSORGUNG</b>	<b>37</b>
8.1	Rezeptierung	37
8.2	Maß-, Abform- und Analysetechniken	39
8.2.1	Maßabdruck / zweidimensionaler Fußabdruck	39
	2-D-Fußscan	39
	Digitale plantare Fußdruckmessung (Pedographie)	41
	Trittspur (Blauabdruck)	42
8.2.2	Formabdruck / dreidimensionaler Fußabdruck	43
	3-D-Fußscan	43
	Trittschaum	44
	Gipsabdruck	44
8.3	Gangbildanalyse	45
<b>9</b>	<b>ANHANG</b>	<b>46</b>
9.1	Tabellarische Übersicht: Abrechnungspositionen	
	Gesetzliche Krankenversicherung	46
9.2	Weiterführende Literatur	48
9.3	Adressen	51
9.4	Über eurocom	52
9.5	Mitglieder der Arbeitsgruppe Einlagen	53
9.6	Bildnachweis	54
	<b>IMPRESSUM</b>	<b>55</b>



---

# 1 Funktion und Produktarten

Orthopädische Einlagen sind ein wesentlicher Bestandteil in der Therapie von Fußkrankungen und Gelenkfehlstellungen der unteren Extremitäten. Darüber hinaus können orthopädische Einlagen die Funktion von Muskulatur, Gang und Körperhaltung positiv beeinflussen. Dabei wirken sie schmerzlindernd und fördern den Heilungsprozess.

Die Therapie mit orthopädischen Einlagen richtet sich immer nach dem individuellen Krankheitsbild des Erwachsenen oder des Kindes. Je nachdem, ob der betroffene Fuß gestützt, geführt oder entlastet werden muss, verordnet der behandelnde Arzt indikationsabhängig eine Versorgung mit stützenden, bettenden, korrigierenden oder sensomotorischen Einlagen.

# 2 Stützende Einlagen mit Längs- und Quergewölbestütze

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.01.0

Stützende Einlagen verfügen über eine Längs- und Quergewölbestütze. Der Einlagenkörper ist aus selbsttragendem, formstabilem und anpassbarem Material gefertigt. Die Deckschicht besteht aus rutschhemmendem, schweißaufsaugendem und abführendem Material.

Stützende Einlagen werden zum Abstützen der Gewölbestrukturen des Fußes und zur Entlastung spezifischer Fußpartien eingesetzt. Sie sollen die physiologische Fußform auch unter Belastung so gut wie möglich erhalten, Überlastungen ausgleichen, die physiologische Bewegung des Fußes unterstützen und so vorhandene Beschwerden lindern. Eine korrigierende Wirkung haben diese Einlagen nicht.

Stützende Einlagen finden ihre Verwendung bei Beschwerden am ausgewachsenen Fuß im Zusammenhang mit folgenden Indikationen:

- Knick-Senkfuß
- Knick-Senk-Spreizfuß
- Spreizfuß mit Hallux valgus
- Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden
- statische Fußbeschwerden nach Frakturruhi-gstellung u. a.
- Hohlfuß
- Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen



---

Stützende Einlagen können bei Bedarf mit weiteren Konstruktionselementen/ Zusätzen ergänzt werden:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung/-polster (08.99.99.0002)
- Rigidusfeder (08.99.99.0003)
- Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004)
- Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)
- Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008)



8/9

Abb. 1: Stützende Einlage

---

# 3 Bettungseinlagen zur Entlastung

Produktuntergruppe im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.02

Wie der Name bereits sagt, haben Bettungseinlagen die Funktion, den Fuß zu betten, ihn durch Druckumverteilung zu entlasten und durch stoßdämpfende Eigenschaften zu schützen. Sie sollen weitere Verformungen des belasteten, nicht mehr korrekturfähigen Fußes verhindern, indem sie ihn gegen Dreh- und Biegebewegungen stabilisieren. Sie verhindern eine Überdehnung von kontrakten Bändern und eine ungewollte Bewegung krankhaft veränderter Gelenke.

Damit entlasten sie den gesamten Haltungs- und Bewegungsapparat. Bettungseinlagen werden nach biomechanischen Gesichtspunkten konstruiert, um Fehlstellungen und damit Fehlbelastungen zu vermeiden. Nicht geeignet sind sie hingegen, um das Gewölbe wiederherzustellen oder Fußfehlformen zu korrigieren. Unterschieden werden zwei Arten dieses Einlagentyps.

## **3.1 BETTUNGSEINLAGEN, ELASTISCH, GGF. DRUCKUMVERTEILEND**

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.02.0

Dieser Einlagentyp besteht aus einem elastischen Grundmaterial der Trägerschicht, um eine stoßdämpfende Wirkung zu erzielen. Die Einlage verfügt über eine stabile Decke und eine darunter liegende dünne Stabilisierungsschicht. Versorgungsziel ist die Vermeidung weiterer Verformungen des belasteten, nicht korrekturfähigen Fußes durch Stabilisierung gegen Dreh- und Biegebewegungen.

---

Indikationen:

- Knick-Senkfuß
- Knick-Senk-Spreizfuß
- Spreizfuß mit Hallux valgus
- Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt
- Ballen-Hohlfuß
- Rheumatischer Spreizfuß
- Hallux rigidus mit Vorfußschmerz
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

Verordnungsfähige Zusätze:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung/-polster (08.99.99.0002)
- Rigidusfeder (08.99.99.0003)
- Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004)
- Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)
- Verkürzungsausgleich, fest (08.99.99.0008)

10/11



Abb. 2: Bettungseinlage

.....

### 3.2 WEICHPOLSTERBETTUNGEN, ELASTISCH, DRUCKUMVERTEILEND

Weichpolsterbettungseinlagen dienen der weichen Abpolsterung des gesamten Fußes zur Vermeidung von Druckspitzen. Sie bestehen aus einem weichbettenden Trägermaterial. Der Einlagenkörper kann dabei in Sandwichbauweise aus Schäumen unterschiedlicher Härtegrade gefertigt und dem Schuhboden adaptiert angepasst werden. Die Bezugsschicht kann aus Textilien oder Leder bestehen.

Das Ziel der Versorgung mit Weichpolsterbettungseinlagen liegt in der Vermeidung von Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen, in der Wiederherstellung der physiologischen Fußform und der Vermeidung von reflexiven Fehlstellungen. Bei Erwachsenen ist eine Versorgung mit Weichpolsterbettungseinlagen vor allem dann indiziert, wenn eine Bettung mit gleichmäßiger und breitflächiger Lastumverteilung ohne Korrektur des Fußes angestrebt wird.

Indikationen:

- Knick-Senkfuß
- Knick-Senk-Spreizfuß
- Spreizfuß mit Hallux valgus
- Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt
- Ballen-Hohlfuß
- Rheumatischer Spreizfuß
- Hallux Rigidus mit Vorfußschmerz
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten

---

Verordnungsfähige Zusätze:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung/-polster (08.99.99.0002)
- Verkürzungsausgleich fest (08.99.99.0008)



Abb. 3: Weichpolsterbettung

.....

# 4 STÜTZENDE, KORRIGIERENDE / ENTLASTENDE SCHALENEINLAGEN

Produktuntergruppe im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.03

Bei Kindern und Jugendlichen wird die korrigierende Schale eingesetzt, um Fußfehlstellungen zu korrigieren und Fehlentwicklungen des Fußes zu vermeiden. Sie sollen den wachsenden Fuß in physiologische Form und Funktion führen sowie postoperative Korrekturergebnisse sichern.

Bei Erwachsenen werden die Schalen zur Entlastung insbesondere der medialen Strukturen genutzt und die Verschlechterung des gegenwärtigen Zustands soll vermieden werden. Für diesen Zweck soll die Einlage die Stellung des Rückfußes verbessern und physiologische Belastungslinien wiederherstellen.

Schaleneinlagen umfassen die Ferse und den seitlichen Fuß schalenartig. Es wird zwischen zwei Arten unterschieden.

## 4.1 SCHALENEINLAGEN, ELASTISCH

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.03.0

Die elastische Schaleneinlage besteht aus einer Walklederdecke, einer darunterliegenden Verstärkungsschicht aus Kunststoff und Kork als eigentliches Trägermaterial. An Stelle der Walklederdecke oder der Korkschiicht dürfen vergleichbare Materialien verwendet werden. Diese Einlagen sind langsohlig gefertigt.

Die elastische Schaleneinlage kann bei folgenden Indikationen verordnet werden:

- Klumpfuß nach knöcherner Korrekturoperation
- ausgeprägte Form des kindlichen Knick-Plattfußes
- Kontrakter Knick-Plattfuß beim Erwachsenen
- Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden

14/15

Verordnungsfähige Zusätze:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung/-polster (08.99.99.0002)
- Rigidusfeder (08.99.99.0003)
- Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004)
- Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)
- Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008)



Abb. 4: Schaleneinlage elastisch

### 4.2 SCHALENEINLAGEN, FEST, VERFORMBAR

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.03.1

Die festen Schaleinlagen sind sehr stabil und werden aus selbsttragenden, formstabilen und anpassbaren Materialien hergestellt. Sie sind in der Regel  $\frac{3}{4}$ -lang.

Die feste Schaleinlage wird bei stark ausgeprägten Krankheitsbildern und Fußdeformitäten verordnet, wie zum Beispiel:

- Knick-Plattfüße
- Klumpfüße nach Wachstumsabschluss
- postoperativ
- sonstige schwere kontrakte Fußdeformitäten

Verordnungsfähige Zusätze:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung/-polster (08.99.99.0002)
- Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004)
- Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)
- Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008)



Abb. 5: Schaleinlage fest



---

# 5 EINLAGEN MIT KORREKTURBACKEN

Produktuntergruppe im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.04

Einlagen mit Korrekturbacken sollen den Fuß bei Fehlstellungen während des Wachstums durch Druck auf bestimmte Fußteile gezielt in eine bestimmte Richtung lenken. Darüber hinaus können sie das Ergebnis von Korrekturoperationen sichern. Um dieses Therapieziel zu erreichen, werden sie aus festen, selbsttragenden Materialien angefertigt.

## **5.1 DREI-BACKENEINLAGEN**

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.04.0

16/17

Drei-Backeneinlagen besitzen, wie der Name bereits aussagt, drei seitlich hochgezogene Backen, die sich im Bereich des Fersenbeins und Großzehenballens innen und im Bereich der Fußwurzel außen befinden. Sie bestehen aus thermoplastisch verformbarem Kunststoff oder aus Metall. In diesem Fall sind sie an der Innenseite mit Lack oder Leder bezogen, um vor Korrosion zu schützen. Drei-Backeneinlagen sind in der Regel  $\frac{3}{4}$ -lang.

Ziel der Versorgung ist die Korrektur des Fußes eines Kindes / Jugendlichen bis Wachstumsende nach dem Drei-Punkt-Prinzip.

Indikationen sind zum Beispiel:

- Kindlicher Sichelfuß
- Zustand nach Klumpfußkorrektur

Verordnungsfähige Zusätze:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002)
- Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008)



Abb. 6: Drei-Backeneinlage

### 5.2 Einlagen mit Winkeln

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.04.1

Einlagen mit Winkeln, auch als Zwei-Backeneinlagen bekannt, sind auf der Innenseite halbschalig ausgearbeitet und besitzen auf der Fersenbeininnen- oder -außenseite einen hochgezogenen Winkel. Sie bestehen aus thermoplastisch verformbarem Kunststoff oder aus Metall. Dann sind sie an der Innenseite mit Lack oder Leder bezogen, um vor Korrosion zu schützen.

Einlagen mit Winkeln sind in der Regel  $\frac{3}{4}$ -lang.

Ziel der Versorgung ist die Korrektur des Fußes eines Kindes / Jugendlichen bis Wachstumsende.

---

Indikationen sind zum Beispiel:

- Kongenitaler Plattfuß bei Kindern
- Valgus- oder Varusfehlstellung des kindlichen Rückfußes

Verordnungsfähige Zusätze:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002)
- Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008)



Abb. 7: Einlage mit Winkeln

### 5.3 WINKELHEBELEINLAGEN

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.04.2

Winkelhebeleinlagen umfassen den Fuß im Fersenbereich schalig und weisen im mittleren Bereich des Fußes auf der Innenseite zwei hochgezogene Winkel auf. Sie bestehen aus Metall und sind an der Innenseite mit Lack oder Leder bezogen, um vor Korrosion zu schützen.

Winkelhebeleinlagen sind in der Regel  $\frac{3}{4}$  -lang.

Ziel der Versorgung ist die Korrektur eines extremen Knickfußes, indem die zwei mittleren Winkel den Fuß eines Kindes / Jugendlichen (bis Wachstumsende) in die korrigierte Stellung zurückdrücken.

Indikationen sind zum Beispiel:

- Kongenitaler Knick-Plattfuß bei Kleinkindern
- erheblicher, nicht kompensierbarer Knickfuß eines Kindes

verordnungsfähige Zusätze:

- Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001)
- Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002)

# **6 EINLAGEN BEI SCHWEREN FUSSFEHLFORMEN**

Produktart im Hilfsmittelverzeichnis: 08.03.07.0

Diese individuellen Sonderanfertigungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn das Therapieziel durch die Standardversorgung auf Basis eines Rohlings nicht erreicht werden kann. Sie sind bei außergewöhnlich ausgeprägten Krankheitsbildern und Fußdeformitäten indiziert – und zwar altersunabhängig. Dabei können sie eine stützende, bettende oder korrigierende Wirkung erzielen. Individuell gefertigte Einlagen bedürfen einer gesonderten medizinischen Begründung.

---

Indikationen:

- Knick-Plattfuß
- Klumpfuß nach Abschluss des Wachstums, auch postoperativ
- sonstige schwere, kontrakte Fußfehlformen

## 6.1 SENSORISCHE EINLAGEN

Kassenverträge führen diese Produktart unter der Nummer 08.03.07.0 oder gegebenenfalls unter einer Kassen-spezifischen Nummer auf.

Sensomotorische (auch propriozeptive, afferenzstimulierende) Einlagen zielen in ihrer Therapie darauf ab, durch eine spezielle Oberflächenmodulation die Eingangssreize (Afferenzen) in das Sensomotorische System gezielt zu verändern, um so entsprechend eines postulierten Effektes eine verbesserte muskuläre Ansteuerung zu erzeugen. Eine medizinische Begründung der Verordnung ist notwendig. Nach dem Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) besteht Rechtsanspruch auf die im Einzelfall erforderliche Versorgung.

20/21

Versorgungsziel ist es, ursächliche Auslöser von funktionellen Beschwerden und Gangbildstörungen durch veränderte neuromuskuläre Signale zu minimieren oder auszuschalten.

## INDIKATIONEN

---

Indikationen sind zum Beispiel:

- Gangbildstörungen auf Grund neurologischer Erkrankungen wie Infantile Cerebralparese, Apoplex, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson u. ä.
- Rotationsfehlstellungen der Füße und Beine, die in der Bewegung zu unphysiologischen Muskel- und Gelenkbelastungen führen
- Fußfehlstellungen, wie Sichel-, Senk-, Knick- und Klumpfuß, die in der Bewegung zu unphysiologischen Muskel- und Gelenkbelastungen führen
- Spitzfuß (idiopathisch oder neurologisch)
- Achillodynie
- Plantarfasciitis
- Tibiakanten-Syndrom
- Tractus-iliotibialis-Syndrom
- Patellaspitzen-Syndrom
- Pes-anserinus-Syndrom



Abb. 8: Sensomotorische Einlage

---

---

# 7 **INDIKATIONEN**

Mögliche Indikationen für eine Versorgung mit Einlagen können sein:

- Senkfuß
- Plattfuß (kontrakt oder flexibel)
- Knickfuß
- Spreizfuß ohne oder mit Vorfußdeformitäten (z.B. Hallux valgus, Hammer- und Krallenzehen)
- Hohlfuß
- Klumpfuß
- Fersensporn und Plantarfasciitis
- Hallux rigidus
- Beinlängendifferenz
- diabetischer und neuropathischer Fuß
- rheumatischer Fuß
- funktionelle Störungen (z. B. Achillodynie, Kniebeschwerden)
- motorische / neurologische Gangbildstörungen (z. B. nach Apoplex, bei Multipler Sklerose)
- angeborene Fehlbildungen
- posttraumatische Zustände
- postoperativ

22/23

Für alle Indikationen gilt, dass die Einlagenversorgung jeweils individuell auf das Beschwerdebild des Patienten abgestimmt sein muss. Im Folgenden werden die häufigsten Indikationen vorgestellt und erläutert, welche Einlagenversorgung möglich ist.

### 7.1 SENKFUSS

Das so genannte Längsgewölbe erstreckt sich proximal der Zehengrundgelenke bis zur Ferse. Dieser gewölbte Bau des Fußes verteilt das Körpergewicht so, dass im Stand ein Drittel auf dem Vorfuß und zwei Drittel auf der Ferse zu liegen kommen. In der Dynamik variiert diese Gewichtsverteilung prozentual erheblich. Das Fußgewölbe wird durch die spezifische Anordnung der Fußwurzel- und Mittelfußknochen gebildet und durch ein Zusammenspiel von Muskeln und Bändern gehalten.

Beim Senkfuß ist das Längsgewölbe abgeflacht. Charakteristisch ist zudem, dass die mediale Fußwurzel inklusive der Fußknöchel verbreitert sind bzw. herausstehen (beim Knick-Senkfuß) und das Fersenbein lateral wegnickt (Valgusfehlstellung des Fersenbeins). Unbehandelt kann sich ein Senkfuß zu einem Plattfuß entwickeln.

Ursächlich für einen Senkfuß sind schwache Bänder und Muskeln sowie Übergewicht. In seltenen Fällen liegen angeborene Fehlbildungen oder Lähmungen bestimmter Muskeln vor.

Patienten mit Senkfuß-Problematik haben anfangs meist keine größeren Beschwerden. Nach stärkeren und längeren Belastungen kann es allerdings zu Beschwerden kommen.

Regelmäßige Fußgymnastik mit dem Ziel, die Fußmuskulatur zu kräftigen, ist bei einem Senkfuß angebracht. Bei Beschwerden sollte eine Einlage mit einer Längsgewölbestütze verordnet werden. Bei Vorliegen einer zusätzlichen Knickfußkomponente sollte die Ferse mit der Einlage lateral umfasst werden, um einen Gegenhalt zu der Längsgewölbestütze zu bieten.



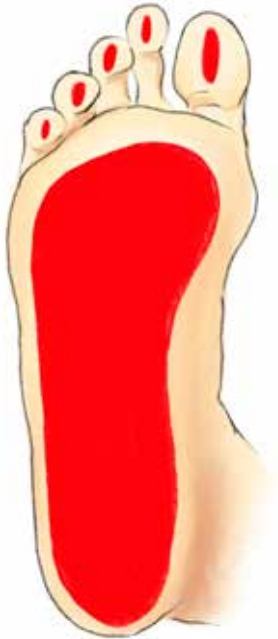


Abb. 9: Senkfuß

## 7.2 PLATTFUSS

Beim Plattfuß (Pes planus), einer angeborenen oder erworbenen Fußfehlstellung, ist das Fußgewölbe durchgetreten. Das heißt, dass die gesamte Fußsohle komplett auf dem Boden aufliegt. In den meisten Fällen entwickelt sich der Plattfuß aus dem unbehandelten Senkfuß. Ein Plattfuß kann mit erheblichen Beschwerden in der unteren Extremität oder am Rücken verbunden sein.

Eine Korrektur des Plattfußes beim Erwachsenen ist nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt möglich. Die Behandlung mit Einlagen verfolgt daher das Ziel, den Fuß weich zu betten, zu entlasten und den Druck umzuverteilen. Die Einlagen werden, wenn möglich – wie beim Senkfuß – mit einer Längsgewölbestütze gefertigt.

### 7.3 SPREIZFUSS

Beim Spreizfuß (Pes transversus planus) ist das Quergewölbe abgeflacht. Bei einigen Patienten liegt sogar der gesamte Vorfuß am Boden auf. Dadurch ist der Vorfußbereich verbreitert.

Folgende Ursachen für den Spreizfuß kommen in Betracht:

- erworbene Muskel- und Bänderschwäche
- langes Stehen oder Gehen ohne Training
- Tragen und Heben schwerer Lasten
- schnelle Gewichtszunahme (Schwangerschaft) oder Übergewicht
- enge Schuhe mit hohen Absätzen

Der Spreizfuß verursacht hauptsächlich Schmerzen im Bereich der Mittelfußköpfchen in Verbindung mit Druckstellen und Hornhautschwielen. Es kann zu weiteren Veränderungen wie beispielsweise Hallux valgus, Krallen- oder Hammerzehen kommen.

Zur Behandlung des Spreizfußes wird eine stützende oder bettende Einlage verordnet, die zur Entlastung des Vorfußes mit einer Spreizfußpelotte angefertigt wird. Diese Pelotte sollte dabei in den meisten Fällen direkt hinter den Mittelfußköpfchen II bis IV (Metatarsalköpfchen) liegen.

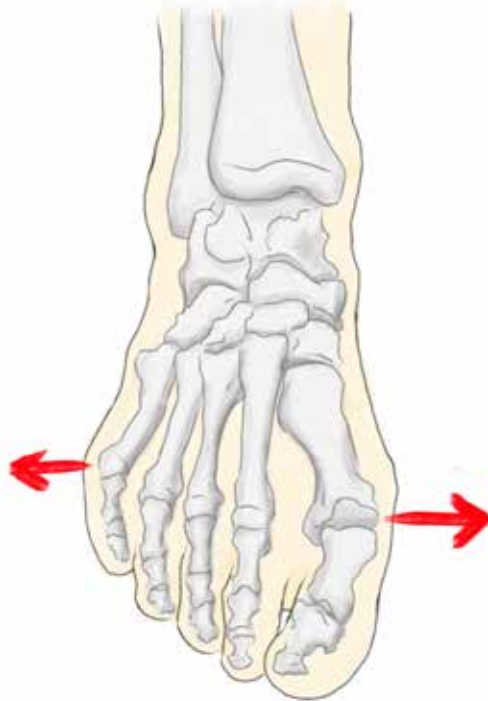


Abb. 10: Spreizfuß

## 7.4 HOHLFUSS

Das Gegenteil vom Plattfuß ist der Hohlfuß (Pes excavatus). Bei dieser Fußfehlstellung ist das Längsgewölbe stark überhöht – unabhängig davon, ob der Fuß belastet wird oder nicht. Durch die Reduzierung der plantaren Belastungsfläche werden Vorfuß und Ferse übermäßig belastet. Es entstehen schmerzhafte Druckstellen und Schwielen. Vermehrt treten zudem Krallenzehen auf.

Ursache für den Hohlfuß ist meist eine Dysbalance infolge neuronaler Hyperinnervation der langen Fußmuskulatur. Einem ausgeprägteren Hohlfuß, der erst im Erwachsenenalter entstanden ist und sich fortschreitend stärker ausbildet, kann auch eine neurologische Grunderkrankung zugrunde liegen.

## INDIKATIONEN

---

Bei einem lockeren Hohlfuß, also in der Wachstumsphase, wird eine korrigierende Einlage mit einer niedrigen medialseitigen Längsgewölbestütze und einem supinierenden (nach außen drehenden) Effekt im Vorfußbereich verordnet.

Der teilkontrakte oder kontrakte Hohlfuß beim Erwachsenen wird hingegen mit einer stützenden Einlage mit einer Polsterung des Vorderfußbereiches oder mit einer Bettungseinlage versorgt.



Abb. 11: Hohlfuß

## 7.5 KLUMPFUSS

Beim Klumpfuß (Pes equino varus adductus) handelt es sich um eine komplexe Fußfehlstellung. Betroffen sind Knochen, Sehnen, Bänder und einzelne Muskeln. Der Fuß befindet sich in Spitzfußstellung und Supination mit Fersenvarus und Vorfußadduktion. Unbehandelt würden die Betroffenen auf der Fußaußenkante, im Extremfall sogar auf dem Fußrücken laufen.

Der Klumpfuß ist in den meisten Fällen angeboren, kann aber auch erworben sein, beispielsweise im Zusammenhang mit einer Poliomyelitis (Kinderlähmung) oder nach traumatischen Ereignissen.

Der Klumpfuß wird so früh wie möglich therapiert, da nur dann eine vollständige Formkorrektur möglich ist. Schon bei Neugeborenen wird deshalb ein redressierender Gips angelegt, der meist bis zum dritten Lebensmonat getragen werden muss. Kommt es zu keiner vollständigen Rückbildung des Klumpfußes, erfolgt eine operative Korrektur mit anschließendem Gips. Zur weiteren Behandlung werden Nachlagerungs-Schienen, Antivarusschuhe oder Einlagen verordnet.



Abb. 12: Klumpfuß

### 7.6 FERSENSPORN UND PLANTARFASCIITIS

Beim Fersensporn, auch Calcaneussporn, handelt es sich um eine meist schmerzhafte Erkrankung am Fersenbein. Im Bereich der Sehnenansätze finden sich dornartige knöcherne Ablagerungen, die zu Schmerzen führen können .

Es gibt zwei typische Stellen, an denen ein Fersensporn auftreten kann:

- Beim hinteren Fersensporn befindet sich der dornförmige Auswuchs am Ansatz der Achillessehne hinten oben.
- Ist die Knochenerhebung unter der Ferse lokalisiert, spricht man von einem sogenannten plantaren Fersensporn.

Dem Fersensporn geht oft eine Entzündung der Fußsohlen-Sehnenplatte (Plantaraponeurose) voran. Normales Gehen ist mit einem Fersensporn oder einer Plantarfasziitis ohne Behandlung zumeist nur unter großen Schmerzen möglich.

Eine Überbeanspruchung der gefährdeten Strukturen (Fußsohlen-Sehnenplatte, Ansatz der Achillessehne) kann ausgelöst werden durch

- schlechtes Schuhwerk
- Übergewicht
- Fußfehlstellungen
- sportliche Überbelastung
- langes Stehen am Arbeitsplatz

Der Fersensporn wird meist konservativ mit Hilfe von orthopädischen Einlagen behandelt, die die Längswölbung stützen. Wenn die Fersenkappe des Schuhs als Gegenhalt zur Unterstützung der Längswölbung nicht ausreicht, kann die Ferse mit der Einlage lateral umfasst werden. Der schmerzhafte Bereich wird ausgespart und gepolstert, um den Sehnenansatz zu entlasten.



Abb. 13: Fersensporn

## 7.7 HALLUX RIGIDUS

Die Bewegungseinschränkung des Großzehengrundgelenks bezeichnet man als Hallux rigidus (steife Großzehe). Diese abnutzungsbedingte, arthrotische Erkrankung ist mit einem in der Regel schmerzhaften Bewegungsverlust im Zehengrundgelenk verbunden. Die Abrollbewegung beim Gehen ist erschwert. Es kann zu einer kompletten Gelenkeinstellung kommen.

Im Verlauf der Erkrankung kommt es im Großzehengrundgelenk zu einer besonders massiven Entwicklung von schmerzhaften Knochenwucherungen. Diese sind oft durch die Haut tast- bzw. sichtbar und verursachen wiederholt auftretende, schmerzhafte Entzündungen.

## INDIKATIONEN

---

Als mögliche Ursachen für das Auftreten eines Hallux rigidus kommen in Frage:

- erbliche Faktoren
- Mikroverletzungen
- Fehl- bzw. Überbelastungen

Die Behandlung des Hallux rigidus mit einer orthopädischen Einlage verfolgt das Ziel, das Großzehengrundgelenk beim Abrollen ruhigzustellen und zu entlasten. Es kommen daher stützende Einlagen mit so genannten Rigidusfedern zum Einsatz, die den Bereich unter der Großzehe versteifen. Diese Maßnahme ist nur in Verbindung mit einer Ballenrolle am Schuh sinnvoll.

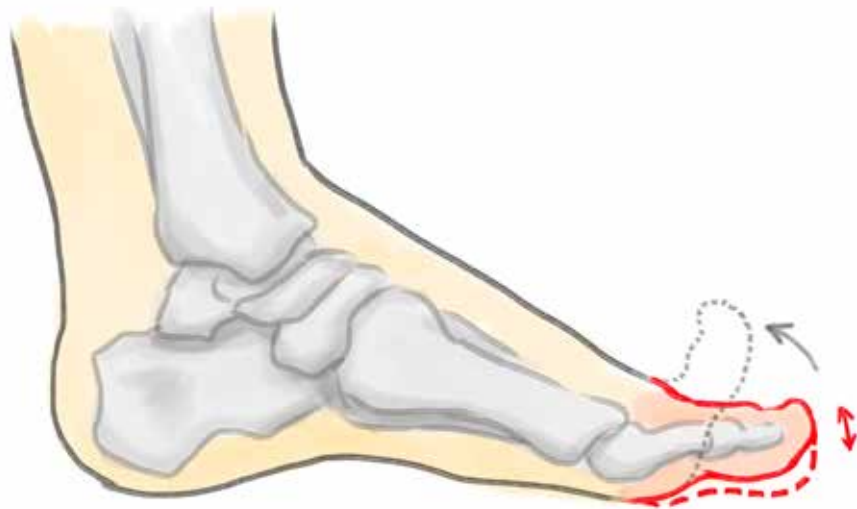


Abb. 14: Hallux rigidus





---

## 7.8 BEINLÄNGENDIFFERENZ

Sind die Beine unterschiedlich lang, spricht man von einer Beinlängendifferenz. Diese ist jedoch in der Regel erst behandlungsbedürftig ab einer Differenz von sechs bis sieben Millimetern. Unterschieden wird zwischen einer anatomischen und einer funktionellen Beinlängendifferenz.

Ursachen einer anatomischen (strukturellen) Beinlängendifferenz können sein:

- Epiphysenverletzungen oder Krankheiten
- Knochenbrüche
- Lähmungen während des Wachstums (Poliomyelitis)
- Morbus Perthes (Erkrankung des Knochengerüsts im Bereich des Hüftkopfes des kindlichen Hüftgelenks) oder auch juvenile Hüftkopfnekrose (Absterben des Femurkopfes)
- Beckenanomalien

32/33

Ursachen für eine funktionelle Beinlängendifferenz können sein:

- unterschiedlich stark ausgeprägte Beinmuskulatur
- Kontrakturen der Gelenke
- Veränderung der Beckenlage durch Skoliose oder Erkrankungen der Iliosakralgelenke
- muskuläre Verspannungen unter anderem als Folge von Organleiden

Eine Beinlängendifferenz kann Veränderungen in der Körperhaltung bzw. in der Wirbelsäule hervorrufen. Bis zu einer gewissen Höhe, meist bis zu einem Zentimeter, kann eine Beinlängendifferenz mit einer Einlage oder einem Verkürzungsausgleich im Schuh ausgeglichen werden. Zu beachten ist dabei, dass die Ferse nicht aus dem Schuh schlüpfen darf. Bei größeren Differenzen hingegen ist es sinnvoller, den Schuh zu erhöhen. Ist auf diesem Weg kein zufriedenstellender Ausgleich möglich, kommt eine Versorgung mit Orthoprothesen oder Unterschenkelorthesen in Betracht.



Abb. 15: Test Beinlängendifferenz

### 7.9 DIABETES-FUSSSYNDROM

Das Diabetes-Fußsyndrom (DFS), umgangssprachlich auch „diabetischer Fuß“ genannt, ist eine häufige Folgeerkrankung beim Patienten mit Diabetes mellitus.

Kennzeichen des DFS ist oftmals eine Durchblutungsstörung (Angiopathie) der unteren Extremitäten sowie eine Erkrankung der peripheren Nervenbahnen (Neuropathie). Neben anderen Sensibilitätsbeeinträchtigungen kommt es häufig zu einem verminderten Schmerzempfinden. Wunden, die beispielsweise durch Anstoßen mit dem Fuß entstanden sind, werden nicht wahrgenommen und oftmals zu spät behandelt. In der Folge entstehen chronische Wunden, die nicht oder nur sehr langsam abheilen. Nicht selten kommt es zu Amputationen.

Entscheidend bei der Versorgung des Diabetes-Fußsyndroms ist neben einer adäquaten Schuhversorgung eine optimale plantare Druckverteilung. Ziel ist es, Verletzungen am Fuß vorzubeugen. Die Patienten werden daher in der Regel mit druckentlastenden Fußbettungen und Spezialschuhen für Diabetiker versorgt.

## 7.10 FUNKTIONELLE STÖRUNGEN

Der Fuß ist über seine tragende Eigenschaft hinaus auch Wirkort für funktionelle Defizite im gesamten Bewegungsapparat. Veränderungen am Fuß nehmen Einfluss auf die Ausrichtung der unteren Extremitäten, wodurch sich die Beckenposition wie auch die Haltung des Rückens verändern können. Funktionelle Beschwerden, die aus diesen Kausalitäten resultieren, können somit über den Fuß und eine adäquate Einlagenversorgung unterstützend oder ursächlich behoben werden.

Zu den funktionellen Störungen zählen beispielsweise:

- Achillodynie
- Plantarfasciitis
- Tibialis anterior/posterior Syndrom
- Chondropathia patellae
- Tractus Iliotibialis Syndrom

34/35

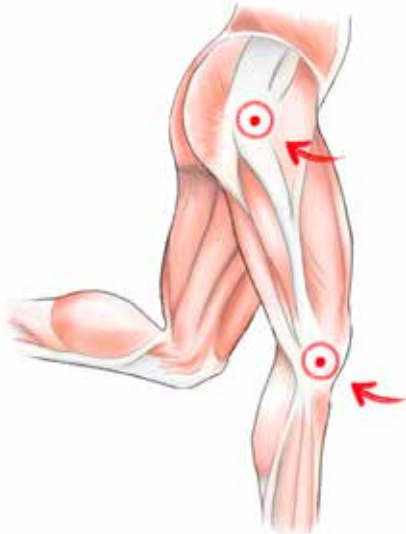


Abb. 16: Funktionelle Störung Tractus Iliotibialis Syndrom

## 7.11 MOTORISCHE / NEUROLOGISCHE GANGBILDSTÖRUNGEN

Neurologische Erkrankungen oder Verletzungen verursachen eine massive Beeinträchtigung der Mobilität des Betroffenen im Alltag. Fehlsteuerungen von Muskelaktivitäten führen zu Veränderungen der Motorik. Einlagen können helfen, Muskelüberspannungen zu reduzieren und bei verminderter Muskelfunktion über Reize und mechanische Komponenten die Stabilität und damit die Gangsicherheit zu verbessern.

Motorische / neurologische Gangbildstörungen sind beispielsweise Begleiterscheinungen dieser Erkrankungen:

- nach Apoplex
- Infantile Cerebralparese
- Multipler Sklerose
- Morbus Parkinson



Abb. 17: Gangbildstörung Beispiele

---

# 8 VERORDNUNG UND VERSORGUNG

## 8.1 REZEPTIERUNG

Einlagen gehören zu den Hilfsmitteln und sind damit zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung ordnungsfähig (§ 33 SGB V). Stationär oder ambulant tätige Ärzte mit Kassenzulassung können sie bei Vorliegen einer entsprechenden Diagnose verordnen.

Verordnet der Arzt Einlagen, übernehmen die Krankenkassen die Kosten bis zur Höhe der gesetzlichen Festbeträge. Diese sind abhängig von der Art der Einlage. Die Versicherten leisten einen Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent, mindestens fünf bis höchstens zehn Euro. Entscheidet sich der Patient für eine Variante, deren Preis über dem Festbetrag der gesetzlichen Krankenversicherung liegt, zahlt er die anfallenden Mehrkosten selbst.

Pro Jahr ist dabei die Versorgungsmenge auf zwei Paar Einlagen begrenzt. Aus hygienischen Gründen haben Versicherte im Rahmen der Erstversorgung einen Anspruch auf zwei Paar orthopädische Einlagen.

Die Verordnung von Einlagen belastet das Arznei- und Heilmittelbudget nicht. Wichtig ist, dass das Rezept alle notwendigen Angaben enthält. Das sind:

- Anzahl
- Verordnungstext und Produktbeschreibung
- Angabe, ob rechte oder linke Seite
- genaue Indikation / Diagnose (ICD-Code)
- Angabe der Hilfsmittelnummer
- Markierung des Feldes Nummer 7 auf dem Rezept mit der Ziffer 7
- Stempel mit lebenslanger Arztnummer
- Unterschrift des Arztes

Zu beachten ist insbesondere: Seit dem 1. April 2017 hat der Gesetzgeber festgelegt, dass sich der Verordnungstext nicht mehr auf das Material, sondern auf die Funktion der Einlage bezieht.

Außerdem gilt, dass der Kostenträger die Kosten nur übernimmt, wenn der Verordnungstext bei entsprechender Diagnose die Zusätze bzw. Ausführungen beinhaltet.

In der Regel ist der Arzt gehalten, sich bei der Produktbeschreibung auf eine Produktart im Hilfsmittelverzeichnis des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV-Spitzenverband) zu beziehen. Diese ist im Hilfsmittelverzeichnis als siebenstellige Positionsnummer benannt und definiert. Die Auswahl des konkreten Einzelproduktes erfolgt durch den Leistungserbringer.

Die Hilfsmittelrichtlinie sieht aber auch vor, dass der Arzt im Rahmen seiner Therapiefreiheit und -hoheit ein bestimmtes Einzelprodukt verordnen kann. Dieses sollte auf dem Rezept begründet werden.

Gründe für eine Einzelproduktverordnung sind:

- Nur ein bestimmtes Produkt besitzt die für die Behandlung notwendigen funktionalen Eigenschaften.
- Der verordnende Arzt hat bei einer spezifischen Indikation mit einem bestimmten Produkt die besten Erfahrungen gemacht.

Weichen Leistungserbringer oder Krankenkasse von einer ärztlichen Einzelproduktverordnung ab, ohne dass die Zustimmung des Arztes hierzu vorliegt, geht die Haftung auf diese über.

Zur qualitätsgesicherten Versorgung gehört außerdem, dass der Arzt prüft, ob das abgegebene Hilfsmittel seiner Verordnung entspricht und den vorgesehenen Zweck erfüllt.

---

## **8.2 MASS-, ABFORM- UND ANALYSETECHNIKEN**

Dem Orthopädie-Schuhtechniker bzw. dem Orthopädietechniker stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, um die Füße seiner Kunden exakt zu vermessen und die Einlagenrohlinge individuell anzupassen.

Die korrekte Anpassung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die verordneten Einlagen ihren medizinischen Zweck erfüllen können. Eine optimale Einlagenversorgung zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass Schuh und Einlage eine funktionelle Einheit bilden. Daher trägt der Orthopädie-Schuhtechniker Sorge dafür, dass die Einlage in den Schuh eingepasst wird.

### **8.2.1 MASSABDRUCK / ZWEIDIMENSIONALER FUSSABDRUCK**

Beim Maßabdruck handelt es sich um einen zweidimensionalen Fußabdruck des belasteten Fußes. Zu den zweidimensionalen Abdruckverfahren gehören der 2-D-Fußscan, die Pedographie und die Trittspur (Blauabdruck).

38/39

#### **2-D-FUSSSCAN**

Der Patient stellt sich barfuß auf einen Scanner, der dessen Füße digital erfasst. Mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms wird der Scan ausgewertet und der Abdruck der Fußsohlen auf dem PC-Bildschirm sichtbar gemacht. Der Scan kann als Grundlage für eine individuelle Einlagenkonstruktion genommen werden, indem die Daten mit einem speziellen Computerprogramm aufbereitet und an eine Fräsmaschine übermittelt werden, die die Einlage produziert. Der Orthopädie-Schuhtechniker muss die Einlage in diesem Fall nachbearbeiten und in die Schuhe des Kunden einpassen.



Abb. 18: 2-D-Fußscan

### **DIGITALE PLANTARE FUSSDRUCKMESSUNG (PEDOGRAPHIE)**

Diese Art der Fußdruckmessung stellt die Belastungsverhältnisse des Fußes entweder in der Dynamik oder in der Statik dar.

Bei der dynamischen Messung geht der Patient barfuß über eine Kraftmessplatte. Sie kann auch durch eine sensorische Messung im Schuh erfolgen. Hochsensible Sensoren, die sich in einer entsprechenden Platte oder Innensohle befinden, nehmen Druck wahr und wandeln sie in digitale Grafiken. Diese dienen der vertiefenden Diagnostik und können vielfach auch zur Erfolgskontrolle einer Einlagenversorgung eingesetzt werden. Durch eine Darstellung von Fußdruckwerten als Farbcode oder 3-D-Druckgebirge für die einzelnen Fußzonen lassen sich genauestens der Fußtyp in der Dynamik, Rechts/Links-Asymmetrien und überlastete Fußbereiche erkennen.



---

Zudem wird durch die Darstellung einer gemittelten Ganglinie das Abrollverhalten der Füße dokumentiert und Abweichungen wie Über- oder Unterpronation aufgezeigt.

Soll die Druckverteilung im Stand beurteilt werden, erfolgt eine statische Messung, bei der der Patient auf der Messplatte steht. Auch hier gibt die elektronische Auswertung der Messung Aufschluss über die Belastung der unterschiedlichen Fußzonen.

Die pedographische Messung im Schuh erhält besondere Bedeutung in der Diagnostik und Versorgungskontrolle von Risikofüßen. Sie hilft dem Orthopädiehandwerker, Druckspitzen zu eruieren und im Hilfsmittel entsprechend zu entlasten. Seitens der Kostenträger besteht in Bezug auf das Diabetes-Fußsyndrom Dokumentationspflicht über 30 Prozent Druckentlastung beim Tragen eines entsprechenden Hilfsmittels.



Abb. 19: Pedographie

.....

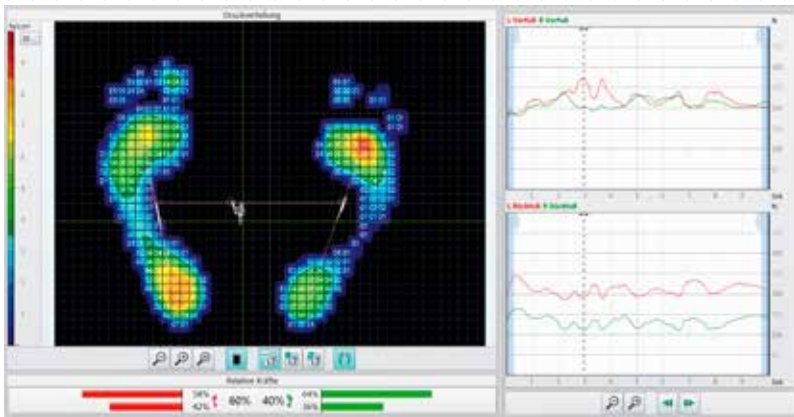


Abb. 20: Bildschirmsicht Fußdruckmessung

### TRITTSPUR (BLAUABDRUCK)

Bei der Trittspur, auch Blauabdruck genannt, stellt sich der Patient auf eine Gummimatte, auf deren Unterseite zuvor Stempelfarbe aufgebracht worden ist. Diese färbt sich je nach Druck mehr oder weniger stark auf ein Blatt Papier ab, das unter der Gummipolsterung liegt. Je höher der Druck desto dunkler verfärbt sich das Papier. So können anhand des Druckbildes Aussagen über belastete und unbelastete Fußzonen getroffen werden. Bei diesem Verfahren können außerdem der Fußumriss und die Lage der Fußpartien eingezeichnet werden.



Abb. 21: Trittspur mit Positivmodell

## 8.2.2 FORMABDRUCK / DREIDIMENSIONALER FUSSABDRUCK

Beim Formabdruck handelt es sich um einen dreidimensionalen Fußabdruck, der direkt vom Fuß des Patienten genommen wird. Zu den dreidimensionalen Abdruckverfahren gehören der 3-D-Fußscan, der Trittschaum- und der Gipsabdruck, auf deren Grundlage ein Formpositiv für die Einlagenherstellung gewonnen wird.

### 3-D-FUSSSCAN

Die Erfassung des Fußes erfolgt hierbei über ein Abscannen der Fußformen in einer speziellen Box oder mittels eines Handscanners. Die über den Scanner ermittelten Daten werden an einen Computer weitergeleitet, um ein virtuelles 3-D-Modell zu erstellen. Dieses wird über ein CAD CAM-System aus einem Block zu einem Formpositiv gefräst, über das die Einlagenherstellung erfolgt.

Alternativ kann auf Basis des virtuellen Formabdrucks auch direkt eine Einlage aus einem Block gefräst werden.

42/43



Abb. 22: 3-D-Fußscan

### TRITTSCHAUM

Bei diesem Verfahren tritt der Patient in einen Kasten, der einen speziellen Formschaum beinhaltet. Dadurch entsteht ein Negativabdruck der Fußsohlen. Um einen Positivabdruck für den Einlagenleisten zu gewinnen, wird der Negativabdruck mit Gips oder Hartschaum ausgefüllt.



Abb. 23 : Trittschaum

### GIPSABDRUCK

Beim Gipsabdruck wird mit Gipsbandagen ein Negativ des Fußes erstellt. Um ein Positivmodell zu erhalten, wird die Gipsform nach dem Aushärten mit Gips oder einem schnellhärten- den Schaum ausgegossen. Das Positiv muss anschließend vom Techniker nachkorrigiert werden, bevor es zur Herstellung der Einlage dienen kann.

### 8.3 GANGBILDANALYSE

Bei der Gangbildanalyse handelt es sich um eine professionelle Beobachtung und Auswertung des Gangbildes. Während der Analyse geht der Kunde über eine definierte Laufstrecke oder auf einem Laufband, wobei seine Bewegung visuell erfasst wird. Häufig werden Analysesysteme mit Kamera verwendet, deren Auswertung mit einer speziellen Software unterstützt wird. So können zum Beispiel einzelne Gangparameter und -phasen bildlich dargestellt werden. Die Gangbildanalyse kann den Arzt bei der Diagnose und Ursachenfindung unterstützen. Dem Techniker hilft sie, besonders bei Abweichungen des Gangbildes, seine Versorgung zu optimieren sowie den Versorgungsverlauf und -erfolg zu dokumentieren.



Abb. 24: Gangbildanalyse

# 9 Anhang

## 9.1 TABELLARISCHE ÜBERSICHT: ABRECHNUNGSPPOSITIONEN GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG

Abrechnungspositionen GKV		Positionen STÜCKWEISE	
		08.99.99.0001 Supinations- Pronationskeil	08.99.99.0002 Fersensporna- ausnehmung / Polster inkl. Lederbezug
Positionen PAARWEISE	08.03.01.0 <b>Stützende Einlage mit Längs- und Quergewölbstütze</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	08.03.02.0 <b>Bettungseinlage elastisch, ggf. druckumverteilend</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	08.03.02.1 <b>Weichpolstereinlage elastisch, druckumverteilend</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	08.03.03.0 <b>Schaleneinlage elastisch</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	08.03.03.1 <b>Schaleneinlage fest verformbar</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Einlagen mit Korrekturbacken</b> 08.03.04.0 <b>Drei-Backeneinlagen</b> 08.03.04.1 <b>Einlagen mit Winkeln</b> 08.03.04.2 <b>Winkelhebeleinlagen</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	08.03.06.0 <b>Stoßabsorber / Fersenkissen</b>		
	08.03.06.1 <b>herausnehmbarer Verkür- zungsausgleich (Stück)</b>		

<b>Positionen STÜCKWEISE</b>			
08.99.99.0003 <b>Rigidusfeder inkl. langer Lederdecke</b>	08.99.99.0004 <b>Weichbettung 4/4 lang</b>	08.99.99.0005 <b>Weichbettung Vorfußbereich</b>	08.99.99.0008 <b>Verkürzungs- ausgleich fest verbunden</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>x</b>

### 9.2 WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Baumgartner, R., Möller, M., Stinus, H. (2013):  
Orthopädie-Schuhtechnik. Grundlagen, Handwerk,  
Orthopädie, C. Maurer

Breusch, S. u. a. (2009):  
Klinikleitfaden Orthopädie Unfallchirurgie, Urban & Fischer

Chantelau, E. (2004):  
Diabetische Füße und ihre Schuhversorgung, De Gruyter

Döderlein, L. u. a. (2000):  
Der Hohlfuß, Springer

Döderlein, L. (2015):  
Infantile Zerebralparese. Diagnostik, konservative und  
operative Therapie, Springer

Eckhardt, A. u. a. (2005):  
Der diabetische Fuß. Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie,  
Springer

eurocom e. V. (2013):  
Diabetes-Fußsyndrom – Krankheitsbild. Diagnose. Therapie,  
[www.eurocom-info.de/service/publikationen](http://www.eurocom-info.de/service/publikationen)

eurocom e. V. (2015):  
Einlagen, Schuhe und Orthesen für den Kinderfuß – Die  
häufigsten Fußfehlstellungen und Bewegungsanomalien im  
Kindesalter,  
[www.eurocom-info.de/service/publikationen](http://www.eurocom-info.de/service/publikationen)

eurocom e. V. (2014):  
Mehr Lebensqualität, weniger Schmerzen:  
Nutzung und Wirksamkeit Orthopädischer Einlagen,  
[www.eurocom-info.de/service/publikationen](http://www.eurocom-info.de/service/publikationen)

Grifka, J. (2005):  
Einlagen, Schuhzurichtungen, orthopädische Schuhe – Indikati-  
on. Verordnung. Ausführung, Thieme



---

Grifka, J. u. a. (2013): Orthopädie, Unfallchirurgie, Springer

Hafkemeyer U. (2010):  
Die infantile Cerebralparese – eine Herausforderung für den  
Arzt und Orthopädie-Techniker, in:  
Medizinische Orthopädie Technik 130,1, 100-102

Hefti, F. (2006):  
Kinderorthopädie in der Praxis, Springer

Klingelhöfer, J. u. a. (2009):  
Klinikleitfaden Neurologie, Urban & Fischer

Krauspe, R. u. a. (2006):  
Der Klumpfuß, Thieme

Leitlinie der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG):  
Diagnostik, Therapie, Verlaufskontrolle und Prävention des  
diabetischen Fußsyndroms (Stand: 2008)

48/49

Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und  
Orthopädische Chirurgie:  
Kindlicher Knick-Senk-Fuß, AWMF-Leitlinien-Register-Nr.  
033/020 (Stand: 31.01.2017)

Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und  
Orthopädische Chirurgie und des Berufsverbandes der  
Ärzte für Orthopädie:  
Kongenitaler Klumpfuß. AWMF-Leitlinien-Register Nr. 033/021  
(Stand: 1.6.2012)

Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und  
Jugendmedizin:  
Behandlungskonzept bei Kindern mit infantiler Zerebralparese.  
AWMF-Leitlinien-Register Nr. 071/008 (Stand: 25.6.2004)

Leitlinie der Gesellschaft für Neuropädiatrie:  
Diagnose und Therapie der Infantilen Cerebralparese (ICP)  
(Kurzfassung). AWMF-Leitlinien-Register Nr. 022/013  
Stand: Mai/Juni 2000)

Ludwig, O. u. a. (2013):  
Einfluss einer sensomotorischen Einlage auf die Aktivität des  
M. peroneus longus in der Standphase, in:  
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Jg. 64, Nr. 3, S. 77-82

Marquardt, M. (2012):  
Laufen und Laufanalyse, Thieme

Matzen, P. (2007):  
Kinderorthopädie, Urban & Fischer

Niethard, F. U. u. a. (2009):  
Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme

Niethard, F.U. (2009):  
Kinderorthopädie, Thieme

Pomarino, D. u. a. (2011):  
Der habituelle Zehenspitzzgang. Diagnostik, Klassifikation,  
Therapie, Schattauer

Rössler, H. u. a. (2005):  
Orthopädie und Unfallchirurgie, Urban & Fischer

Ruchholtz, S. u. a. (2012):  
Orthopädie und Unfallchirurgie, Thieme

Sommer, C. (2010):  
Fußchirurgie – ein praktischer Leitfaden, Springer

Wolansky, R. (2008):  
Orthopädie-Schuhtechnik für Podologen, Schattauer Verlag

---

## 9.3 ADRESSEN

Arbeitsgemeinschaft Orthopädieschuhtechnik GbR (AGOS)  
Pfälzer-Wald-Straße 32, 81539 München  
Tel.: 089 68 99 98 0, [www.ag-os.de](http://www.ag-os.de)

Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. (BVOU)  
Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin  
Tel.: 030 79 74 44 44, [www.bvou.net](http://www.bvou.net)

Bundesfachschule für Orthopädieschuhtechnik – anerkannte  
Fachschule für Podologie  
Ricklinger Stadtweg 92, 30459 Hannover  
Tel.: 0511 42 10 52, [www.bfo-hannover.de](http://www.bfo-hannover.de)

Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT)  
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund,  
Tel.: 0231 5570 50 0, [www.biv-ot.org](http://www.biv-ot.org)

Deutsche Assoziation für Fuß und Sprunggelenk e. V. (D.A.F.)  
Alter Markt 9-13, 42275 Wuppertal  
Tel.: 0202 26 56 80, [www.daf-online.de](http://www.daf-online.de)

Deutscher Orthopäden- und Unfallchirurgen-Verband (DOUV)  
Heinrich-Barth-Straße 28, 6615 Saarbrücken  
Tel.: 0681 96 76 75 55, [www.douv.de](http://www.douv.de)

Gesellschaft für Fußchirurgie e. V.  
Gewerbegebiet 18, 82399 Raisting  
Tel.: 08807 94 92 44, [www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de](http://www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de)

Zentralverband Orthopädieschuhtechnik (ZVOS)  
Ricklinger Stadtweg 92, 30459 Hannover  
Tel.: 0511 54 39 80 80, [www.zvos.de](http://www.zvos.de)

### 9.4 ÜBER EUROCOM

eurocom (european manufacturers federation for compression therapy and orthopaedic devices) ist die Herstellervereinigung für Kompressionstherapie und orthopädische Hilfsmittel. Der Verband versteht sich als Gestalter und Dialogpartner auf dem Gesundheitsmarkt und setzt sich dafür ein, das Wissen um den medizinischen Nutzen, die Wirksamkeit und die Kosteneffizienz von Kompressionstherapie und orthopädischen Hilfsmitteln zu verbreiten. Zudem entwickelt eurocom Konzepte, wie sich die Hilfsmittelversorgung aktuell und in Zukunft sicherstellen lässt. Dabei vertritt eurocom die gemeinsamen Interessen der Hersteller gegenüber anderen Akteuren in der Gesundheitspolitik, beispielsweise der Ärzteschaft, den Krankenkassen, politischen Entscheidern sowie dem Fachhandel.

Zur Erfüllung der Verbandsaufgaben initiiert und unterstützt eurocom wissenschaftliche Studien und stößt den Wissenstransfer an, gestaltet politische Prozesse aktiv mit, gibt einen Überblick über aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen und schafft Branchentransparenz durch vierteljährliche Marktanalysen.

eurocom wurde 1998 zunächst als Vereinigung der im deutschen und europäischen Markt agierenden Hersteller von Kompressionstherapie gegründet. Seit 2003 vertritt eurocom auch Hersteller von Einlagen, Bandagen, Orthesen sowie Prothesen und Hilfsmitteln zur modernen Brustversorgung.

Dem Verband gehören nahezu alle im deutschen Markt operierenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen Kompressionstherapie und orthopädische Hilfsmittel an.

---

## 9.5 MITGLIEDER DER ARBEITSGRUPPE EINLAGEN

Bauerfeind AG, Geschäftsbereich Fußorthopädie  
Triebeser Straße 16, D – 07937 Zeulenroda-Triebes  
[www.bauerfeind-fussorthopaedie.de](http://www.bauerfeind-fussorthopaedie.de)

medi GmbH & Co. KG, Department Footcare  
Elbringhausen 2+4, 42929 Wermelskirchen  
[www.medi.de](http://www.medi.de)

Orthopädie Kall GmbH  
Dreherstraße 21-23, D – 42899 Remscheid  
[www.ok-kall.de](http://www.ok-kall.de)

perpedes GmbH  
Tannenbergstr. 139, D – 73230 Kirchheim/Teck  
[www.perpedes.de](http://www.perpedes.de)

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5, D – 42897 Remscheid  
[www.schein.de](http://www.schein.de)

SPANNRIT GmbH  
Industrietstr. 3, D – 63801 Kleinostheim  
[www.spannrit.de](http://www.spannrit.de)

SPRINGER Aktiv AG  
Lengeder Str. 52, D – 13407 Berlin  
[www.springer-berlin.de](http://www.springer-berlin.de)

Vaupel Orthopädie-Technik GmbH  
Am Pannofen 49, D – 47608 Geldern  
[www.vaupel-online.de](http://www.vaupel-online.de)

## **9.6 BILDNACHWEIS**

Perpedes GmbH: Abb. 7, 22

Schein Orthopädie Service KG: Abb. 1, 3, 5, 6, 18, 19, 20

SPRINGER Aktiv AG: Abb. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24

Vaupel Orthopädie-Technik GmbH: Abb. 2, 4

Weißer, Joachim: Abb. 21, 23

# Impressum

Herausgeber:

eurocom e.V. • european manufacturers federation for compression therapy and orthopaedic devices, Berlin

Reinhardtstraße 15  
D – 10117 Berlin

Phone: +49 (0) 30 – 25 76 35 06 0

Fax: +49 (0) 30 – 25 76 35 06 9

E-Mail: [info@eurocom-info.de](mailto:info@eurocom-info.de)  
Internet: [www.eurocom-info.de](http://www.eurocom-info.de)

Redaktion: Antje Schneider, eurocom e. V.

1. vollständig überarbeitete Neuauflage 2019

Hinweis:

Die Inhalte dieser Publikation sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Nutzung ist nur zum privaten Zweck zulässig. Jede Vervielfältigung, Vorführung, Sendung, Vermietung und/oder Leihe des Handbuchs oder einzelner Inhalte ist ohne Einwilligung des Rechteinhabers untersagt und zieht straf- oder zivilrechtliche Folgen nach sich. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Texte des Informationshandbuchs sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. eurocom e. V. übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

**eurocom e.V.**

Reinhardtstraße 15  
D – 10117 Berlin  
[www.eurocom-info.de](http://www.eurocom-info.de)